


# Noahlink Wireless installieren | Installation

## Schritt für Schritt



### Hinweis

Um den optimalen Betrieb des Noahlink Wireless zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass es frei steht und eine direkte Sichtverbindung zwischen Noahlink Wireless und den anzupassenden Hörsystemen besteht.

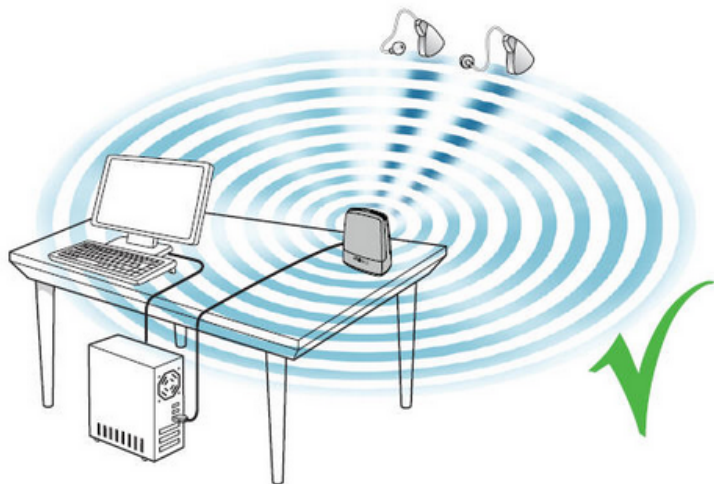

### Achtung

Noahlink Wireless funktioniert nicht richtig, wenn ein USB-Hub verwendet wird. Schließen Sie diesen daher direkt an Ihren PC an!

1. Bevor Sie den Noahlink Wireless verbinden, stellen Sie sicher, dass Noah und die passende Anpass-Software installiert ist. Der Noahlink Wireless Treiber wird während der Installation der Anpass-Software installiert.
2. Nachdem Sie die Anpass-Software installiert haben, stecken Sie den Noahlink Wireless per USB-Kabel an einen USB-Anschluss am Computer an. Die grüne Lampe leuchtet 2-3 Sekunden auf und der Noahlink Wireless Treiber wird installiert bzw. zeigt an, dass der Noahlink Wireless angeschlossen ist - ggf. müssen Sie in Ihrer Anpass-Software einstellen, dass diese sich per Noahlink Wireless verbinden soll.
3. Sie sind jetzt bereit für die Anpassung von Wireless Hörsystemen.

Eine Wireless-Anpassung kann durch mehrere Faktoren erschwert werden, z. B. Einstellungen von Ausrüstung und räumliche Anordnung der Anpass-Umgebung.

- Stellen Sie den Noahlink Wireless auf den Tisch und sorgen Sie für eine direkte Sichtverbindung mit den Hörsystemen, die maximal 3 Meter entfernt sein sollten.
- Stecken Sie den Noahlink Wireless nicht an einen USB-Anschluss mit anderen USB-Geräten an (z. B. Bluetooth-Dongle), da dies die Leistungsfähigkeit von Noahlink Wireless verringern kann.
- Bei der Anpassung von Hörsystemen in einer schalldichten Kabine stellen Sie Noahlink Wireless in der Kabine oder in der Nähe der Kabine auf.
- Es wird davon abgeraten, zwischen dem Noahlink Wireless und dem PC USB-Kabel mit mehr als 3 Metern Länge zu verwenden.

## Lösungen

- [Noahlink Wireless Firmware Upgrade | Installation](#)

## Siehe auch ...

- [Noah \(Downloads\)](#)