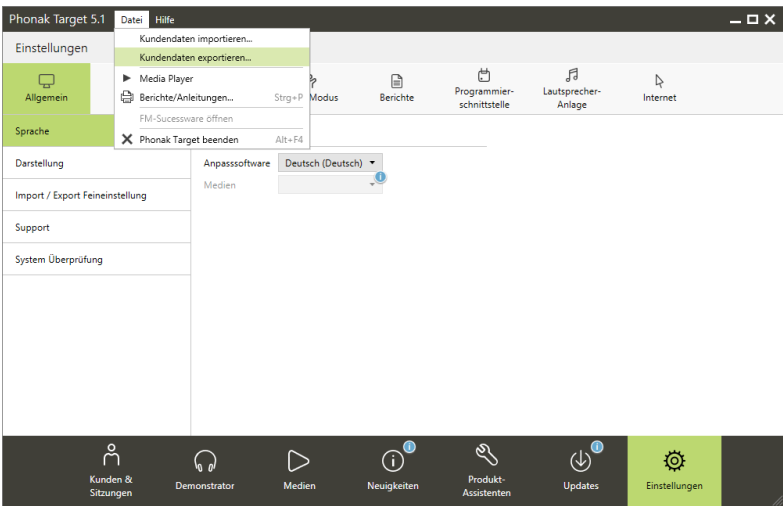
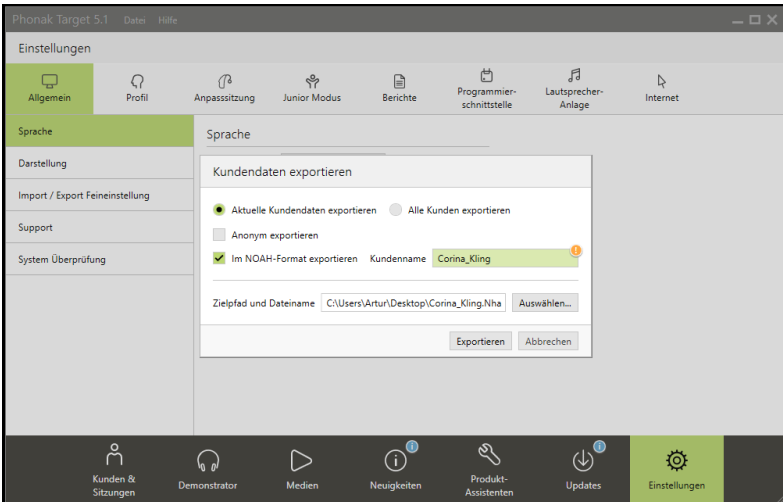


Externe Noahdaten importieren | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Arbeiten Sie z. B. mit einem Laptop und dort mit 'stand alone' Module (z. B. PHONAK), können Sie die Noah Daten exportieren, um diese in AMPAREX weiterzuverarbeiten. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

	Beschreibung
 The screenshot shows the Phonak Target 5.1 application window. The 'Datei' (File) menu is open, and 'Kundendaten exportieren...' (Export customer data...) is highlighted. Other menu options include 'Kundendaten importieren...', 'Media Player', 'Berichte/Anleitungen...', 'FM-Successware öffnen', and 'Phonak Target beenden'. The left sidebar shows 'Einstellungen' (Settings) with 'Allgemein' (General) selected. The bottom toolbar includes icons for 'Kunden & Sitzungen', 'Demonstrator', 'Medien', 'Neuigkeiten', 'Produkt-Assistenten', 'Updates', and 'Einstellungen'.	<ul style="list-style-type: none">Öffnen Sie das entsprechende Modul und exportieren Sie die Kundendaten.
 The screenshot shows the 'Kundendaten exportieren' (Export customer data) dialog box. It has two radio buttons: 'Aktuelle Kundendaten exportieren' (selected) and 'Alle Kunden exportieren'. There is a checkbox for 'Anonym exportieren' which is unchecked. A checked checkbox 'Im NOAH-Format exportieren' is followed by a text field 'Kundenname' containing 'Corina_Kling'. Below this is a text field 'Zielpfad und Dateiname' containing 'C:\Users\Artur\Desktop\Corina_Kling-Nha' and an 'Auswählen...' button. At the bottom are 'Exportieren' and 'Abbrechen' buttons. The background shows the 'Einstellungen' (Settings) window with 'Sprache' (Language) selected in the sidebar.	<ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie dabei die nachfolgenden Exporteinstellungen. Insbesondere, dass die Daten im Noah Format exportiert werden.

Externe Noahdaten importieren | Arbeitsablauf

AMPAREX - Stuttgart

Wertung
Noah

Noah Export | Noah Import

Datei auswählen
Noah nhad\Datei: C:\Users\Wlun\Desktop\Corina_Kling.Nha

Zuordnung

Eindeutige Zuordnung		
Zu importierender Kunde	Aktion	Zugeordnet zu Kunde

Unklare Zuordnung (1)		
Zu importierender Kunde	Aktion	Zugeordnet zu Kunde
Kling, Corina, 16.10.1975	Kunde zuordnen	Kling, Corina, 16.10.1975

Aktion: Kunde zuordnen | Zugeordnet zu Kunde: Kling, Corina

Import starten

Es wurden 1 Datensätze verarbeitet

Dem Kunden Kling, Corina, 16.10.1975 wurden folgende Daten hinzugefügt:
1 neue Noah Sitzung(en) erstellt,
2 neue Noah Aktion(en) erstellt,
0 bestehende Aktion(en) belassen.

- Starten bzw. öffnen Sie Ihr AMPAREX und wechseln dort in die Wartung und dort in das Noah Modul.
- Über den Reiter 'Noah Import' wählen Sie die zu importierende Datei aus.
- Ist der Kunde zuvor schon in AMPAREX angelegt worden, wird dieser als Zuordnung erkannt. Andernfalls wählen Sie den entsprechenden Kunden dazu aus.
- Starten Sie den Import und nach wenigen Augenblicken sind die Daten importiert.

Tipp

Haben Sie nur einen Datensatz (ein Kunde) zum Importieren, können Sie diesen auch direkt beim Kunden importieren [Noah Import und Export | Kunde, AKUSTIK, THERAPIE](#).