


# Rodenstock DNEyeScanner | Optik Schnittstelle

Schnittstelle zum Rodenstock DNEye Scanner.

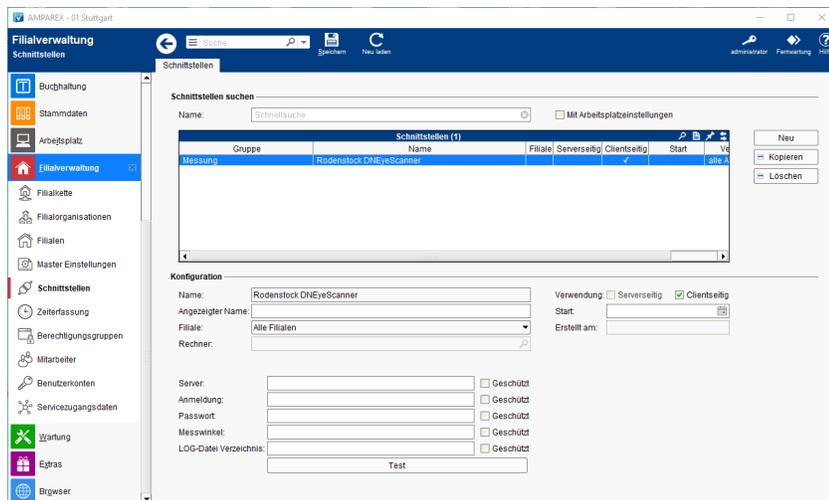

## Importierte Messwerte

	Status
Sphere	✓
Zylinder	✓
Achse	✓
PD	✓
IOD	✗

## Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ).

## Konfiguration

Feld	Beschreibung
Angezeigter Name	Schnittstellen können in bestimmten Konfigurationen nur ein mal pro Arbeitsplatz, pro Filiale bzw. pro Filialkette konfiguriert werden. Eine Mehrfachanlage wird mit einer Hinweismeldung verhindert. Der Name bzw. der Anzeigename eines Dienstes ist ebenfalls ein Kriterium für die Eindeutigkeit. Dadurch können Schnittstellen mehr als ein mal konfiguriert werden. Dies ist von der jeweiligen Schnittstelle abhängig.
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch <a href="#">Schnittstellen   Arbeitsplatz</a> ). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

## Details

# Rodenstock DNEyeScanner | Optik Schnittstelle

Feld	Beschreibung
Server (Pflicht)	Die IP-Adresse oder die vollständige URL, unter der der DNEyeScanner-Service installiert wurde & erreichbar ist (z. B. 192.168.0.100 bzw. <a href="https://192.168.0.1:8443/DNEyeScannerService">https://192.168.0.1:8443/DNEyeScannerService</a> )
Anmeldung (Optional)	Benutzername, falls einer vergeben wurde (z. B. <i>aberrometer</i> )
Passwort (Optional)	Passwort, falls eines vergeben wurde (z. B. <i>dneyscanner*1877</i> ) <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> <b>Hinweis</b></p><p>Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch <a href="#">Sicherheit   Filialverwaltung</a>), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.</p></div>
Messwinkel (Optional)	Standard-Messwinkel (z. B. 20)
Log-Datei Verzeichnis	Wird nicht verwendet
Test	Prüft, ob eine Verbindung zum Scanner aufgebaut werden kann.

Siehe auch ...

- [Messung \(Optik Schnittstellen\)](#)