


Form und Facette | OPTIK

Die ABC METS Form wird bei der Glasbestellung über HoyaiLog übertragen. Wenn Werte, wie z. B. HSA, Nahtilhöhe oder Y, an HoyaiLog übertragen werden sollen, ist entweder die Übermittlung einer zuvor getraceten Form oder die Angabe der ABC METS Form erforderlich.

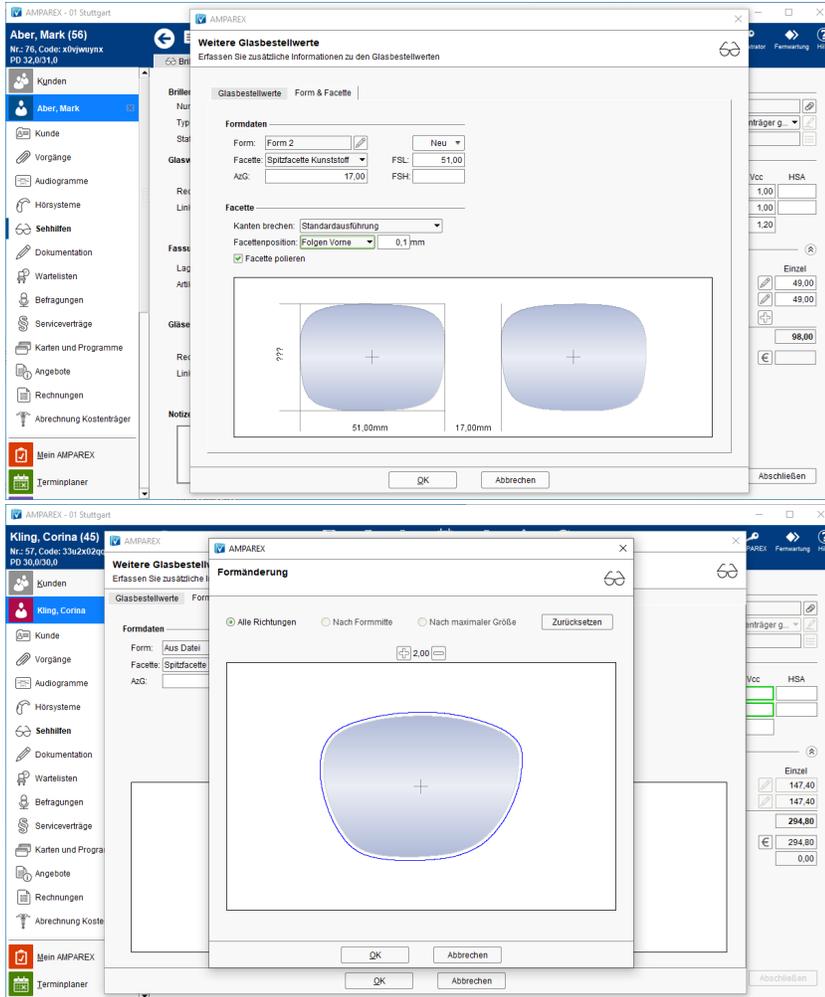

Maskenbeschreibung


Werden zusätzliche Glasbestellwerte im Brillenauftrag des Kunden eingegeben, kann zusätzlich die Form & Facette ausgewählt werden.

Feld	Beschreibung
------	--------------

Form und Facette | OPTIK

Form 

Anzeige des Namens der Form, die mit dem Feld 'NEU' ausgewählt wurde. Zusätzlich lassen sich 'getracte' Fassungsformen auch verändern und löschen, wenn die Facettenform Spitzfacette ausgewählt ist. Allerdings nur gleichmäßig in alle Richtungen und in 0,1-mm-Schritten.

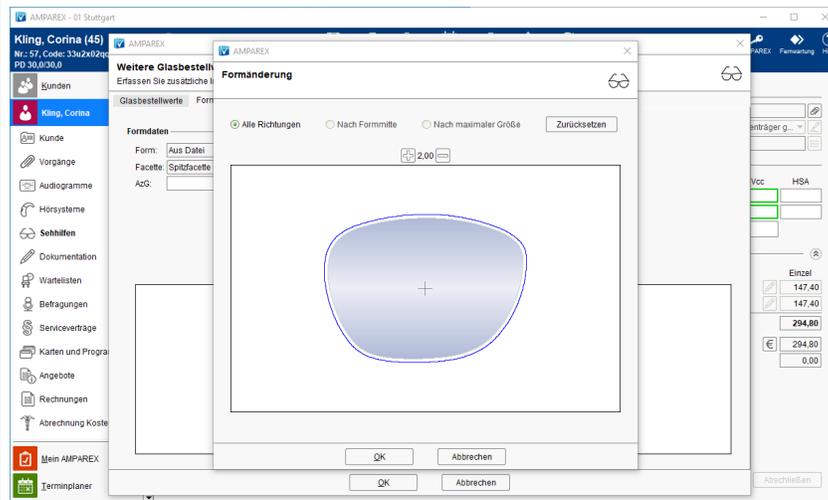


FSL & FSH

Wird zu einem Brillenauftrag eine Form angegeben, egal ob aus dem Tracer oder aus einer Standardform, muss zwingend FSH und FSL, sowie eine Facette angegeben werden. Eine Form ohne diese Werte kann nicht gespeichert werden.

Facette

Auswahl der Facette (Spitzfacetten Metall, Spitzfacetten Kunststoff, Flachfacette & Rille). Bei der Auswahl der Flachfacette können zusätzlich 'Bohrlöcher' angegeben werden.

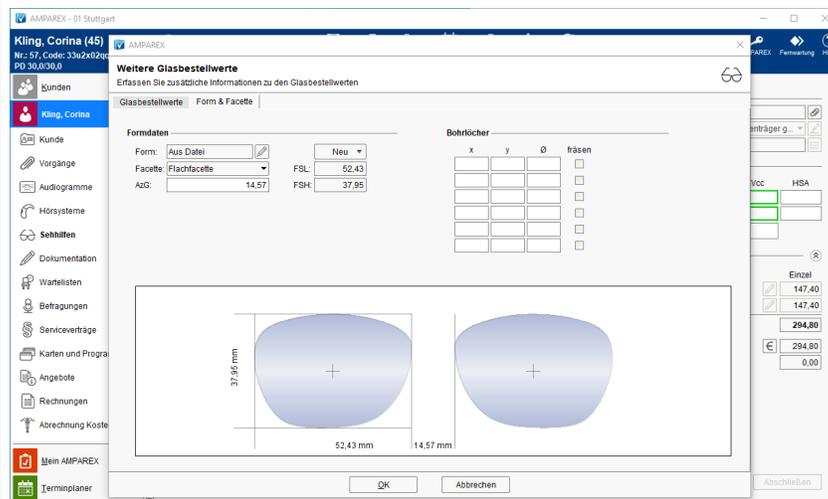

AzG

Wird zu einem Brillenauftrag eine Form angegeben, egal ob aus dem Tracer oder aus einer Standardform, muss zwingend AzG, sowie eine Facette angegeben werden. Eine Form ohne diese Werte kann nicht gespeichert werden.

Kantenbrechen

Die Intensität der Kantenbrechung kann mit 'dünn', 'mittel' und 'stark' angegeben werden.

Facettenposition

Abstand der 'Facette' von Brillengläsern als Angabe von 30 % bis 70 % und zusätzlich als freie Angabe ab 0,1 mm.

Siehe auch ...

- [Gläser auswählen | Kunde, OPTIK](#)
- [Glasbestellwerte | Kunde, OPTIK](#)
- [Form und Facette | OPTIK](#)
- [Gläser bestellen | OPTIK Kunde](#)
- [Sehhilfenverordnung | OPTIK Kunde](#)

